

## INSTRUCTIVO DE USO

### LAMPARA LUZ INFRARROJA TIMER - REFLECTOR ALARMA VISUAL Y AUDITIVA DIGITAL MOD. 045 TRAD




#### GUÍA DE USO:

A fin de que su lámpara funcione de manera correcta, recomendamos tomar las siguientes precauciones:



- 1-Asegurese de que ninguna pieza se encuentre dañada o falte.
- 2-Coloque su lámpara en una superficie plana y estable, para evitar un mal funcionamiento o inestabilidad de la misma
- 3-Antes de conectarla asegurese de que este apagada y que el enchufe y el voltaje son compatibles.
- 4-Al limpiar su lámpara utilice un paño suave y seco, no use disolventes ni un paño húmedo
- 5-Para cambiar los focos desconecte su lámpara y reemplace por otras del mismo tamaño, voltaje y wattage
- 6-Debido a que este producto no es a prueba de agua, no deberá ser utilizado o guardado en lugares donde pudiera ser salpicada por líquidos, gotas de lluvia, salpicaduras de agua, zumo o café, vapor, transpiración, etc. ya que perjudican el funcionamiento del producto.
- 7-Si necesita reparar esta unidad, dirijase a su distribuidor.



Al conectar la lampara automáticamente encenderá el LCD con una leyenda en el mostrando lo siguiente:

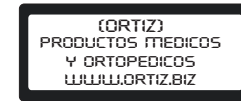


Después se cambiará a:

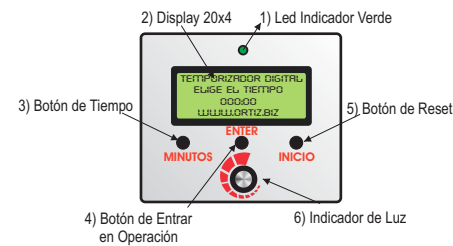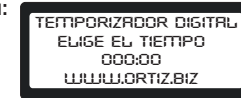

La lampara tiene 3 botones (minutos, enter e inicio).

Configuración de tiempo: te permite determinar el tiempo de apagado de la lámpara y va desde 1 min. hasta 24 hrs.

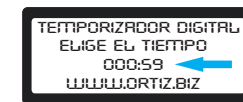

Al terminar el tiempo deseado la lámpara automáticamente se apagara seguida de una breve y ligera alarma avisando que termino el tiempo.

**NOTA:** Deberá de oprimir el botón INICIO para suspender el sonido de la Alarma.



La lámpara también cuenta con un potenciómetro el cual al estar en uso la lámpara podrás regular la potencia de la intensidad del foco.



**PRODUCTOS MEDICOS,  
ORTOPEDICOS Y DE REHABILITACION**



## **LAMPARA LUZ INFRARROJA TIMER - REFLECTOR ALARMA VISUAL Y AUDITIVA DIGITAL MOD. 045 TRAD**

### **GARANTÍA**

Este Producto está garantizado contra defectos de Fabricación por un periodo de 1 año a partir de la fecha de compra. Se aplican restricciones.

**PRECAUCIONES:** No se garantiza este producto por mal uso y/o intentos de reparación por parte de personas no calificadas.

Para hacer válida su garantía debe presentar: el empaque, el producto, la poliza vigente y comprobante de compra. Si usted adquirió el producto con cualquier otro distribuidor, haga válida su garantía con el mismo.

Health Group Industrias de México S.A. de C.V.  
Prof. Av. Vallarta 6245 Col. Cd. Granja, Zapopan Jalisco, México  
C.P. 45010 Telefono: (33) 3777 4000 Ventas: 3777 4001 Fax: (33) 3777 4002  
RFC: HGI9711269IA E- Mail: contacto@ortiz.biz  
www.ortiz.biz

**Servicio a Clientes: 3777-4000**